

CASTSHOE-WP キャストシュー®・WP

歩行用キャストカバー（防水）
WALKING CAST COVER

取扱説明書

- この取扱説明書を熟読の上、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。


はじめに

“キャストシュー・WP”は、足関節等に巻いたキャスト材を保護し、屋内または屋外での歩行による汚れを防ぐ製品です。強い衝撃を吸収するための製品ではありません。ご使用にあたっては、必ず医師にご相談のうえ正しくお使いください。また、安全にご使用いただくため用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。

商品についてご不明な点は下記宛までご連絡ください。

アルケア株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル 0120-770175

製品概観図

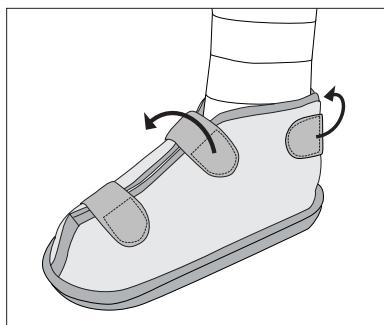

種類と規格

種類	商品コードNO.	規格		1箱入数
		足長(目安)	全長(内寸)	
LL	17731	26.5~29.5cm	32.0cm	1コ
L	17732	24.5~26.5cm	28.0cm	1コ
M	17733	22.5~24.5cm	26.0cm	1コ
S	17734	20.5~22.5cm	24.0cm	1コ

※サイズは、規格の「足長」を目安とし、ご自分の足のサイズに合わせてお選びください。

※2つのサイズにまたがる場合には、大きいサイズをお選びください。

使用上のご注意

*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。



警告 人身事故につながる恐れのある注意事項

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は単回使用製品です。1名に使用した本品は、再使用しないでください。
- 使用中、または使用後に発疹、かゆみ、痛み、うっ血などの異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 本体にたるみがない様に装着してください。
- 本品が破損・変形したり、著しく汚れた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本体に面ファスナーがしっかりとまわっていること、また本体が抜け落ちないことを確認してからご使用ください。
- 面ファスナーが長すぎる場合には、適切な長さにカットしてご使用ください。
- 雨天時における屋外での使用や濡れた床での使用は、滑りやすく転倒する恐れがありますのでご注意ください。
- 適切なサイズをお選びのうえご使用ください。サイズが合っていない場合、転倒などの恐れがありますのでご注意ください。
- 固定材の種類、手技、足関節の肢位によっては本品を装着できない場合があります。医師に相談されるか、装着をお試しのうえでご購入ください。

注意 物損事故につながる恐れのある注意事項

- 本品が水や汗等で濡れた場合は、布で拭き取るか、よく乾かしてからご使用ください。
- 本品を濡れたまま放置すると、変形や縮みの原因となります。水に濡れた後は、拭き取るか、十分に乾かしてください。
- 本体には撥水・防水加工を施した生地を使用しておりますが、多量の水で濡れてしまう場合や、生地の表面に水が染み込む場合があります。また、水中での使用に耐えうるものではありません。ご使用の際は十分ご注意ください。
- キャスト材が十分に硬化してからご使用ください。
- 面ファスナーを着衣に引っかけないようにご注意ください。

組成・成分表示

- ナイロン・塩化ビニル・酢酸ビニル共重合体・ポリプロピレン

保管上のご注意

- 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて、室温保管してください。

取扱方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を布等に染み込ませ汚れをふき取ってください。
- 漂白剤、洗濯機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後は、陰干してください。

廃棄方法

- 上記組成・成分に関する各自治体の判別方法に従ってください。

アルケア株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階

TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825 <http://www.alcare.co.jp>

東京営業所 TEL.03-5638-8161

仙台営業所 TEL.022-715-2733

広島営業所 TEL.082-831-8777

首都圏東営業所 TEL.048-834-5614

名古屋営業所 TEL.052-222-3860

福岡営業所 TEL.092-441-8372

首都圏西営業所 TEL.045-472-7511

北陸営業所 TEL.076-243-5602

札幌営業所 TEL.011-261-1721

大阪営業所 TEL.06-6337-2985

INTERNATIONAL SALES DIVISION TEL.81-3-5611-7819

■アルケア医工学研究所 ■千葉工場 ■オストメイトサービスセンター